chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/01327/?_locale=it

01327 PARALLELA PLUS 3M TILT

Parallele modulari per la riabilitazione motoria. Lunghezza 3 metri e corrimani regolabili in altezza cm 74 ÷ 101 e inclinazione della base della pedana da 0° a +10°

È un sistema di barre parallele di **3 metri di lunghezza** per l'esercizio di un'attività fisica o riabilitativa, costituito da una struttura in acciaio verniciato e da una pedana in legno bilaminato, antiusura e dotata di rampe d'accesso. I corrimano sono in termoplastica antiscivolo e a distanza regolabile . Tutte le parti sono facilmente lavabili. L'altezza dei corrimani è variabile da **74 a 101 cm**, quindi adatta per soggetti **adulti**. È possibile variare **l'inclinazione della base della pedana da 0° a +10°** in modo semplice e con un unico comando manuale. L'inclinazione è servo-assistita da molle a gas e consente al terapista di effettuare le regolazioni, prima dell'utilizzo da parte del paziente, con un modesto sforzo.



01327_1_preview

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

PARALLELA PLUS 3M TILT

Queste barre parallele sono regolabili in altezza con l'innovativo "STandGOSystem™" che consente un adattamento immediato alla corporatura dell'utente, sia adulto che bambino. L'altezza dei corrimano può essere anche modificata durante l'esecuzione dell'attività riabilitativa.

Possono essere utilizzati sulla pedana dei moduli in termoplastica oppure dei sacchetti per lo svolgimento di specifici percorsi terapeutico-riabilitativi.

La modularità consente di realizzare sistemi di barre parallele della lunghezza desiderata smontando le rampe d'accesso dal lato dell'abbinamento.

Garanzia: 24 mesi

CE CE


CE RICICLO

CE MADE IN ITALY

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso (kg)	106
Dimensioni max (cm)	311 x 81 x 108 h
Altezza corrimani min - max (cm)	74 ÷ 101
Portata massima pedana inclinata (kg)	150
Regolazione in inclinazione della pedana	manuale a gas
Sistema di regolazione in altezza dei corrimani	STandGO™, doppia molla a gas

Barra di fine corsa	di serie
Gradi di inclinazione pedana	Max 10°
Portata su singolo corrimano (kg)	135
Larghezza dei corrimani min - max (cm)	55 ÷ 71
Modularità (abbinamento di più parallele)	scivolo d"accesso rimovibile
Sistema di regolazione in larghezza dei corrimani	manuale, 3 posizioni disponibili

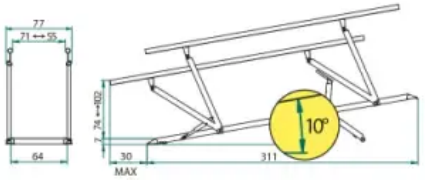

Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - PARALLELE STANDARD e PLUS — PDF | 1.5 MB

IT

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000079_EN.002.1.0.2.pdf — PDF | 1.5 MB

EN

IFU - Istruzioni per l'uso - MANUALE D'USO E MANUTENZIONE — PDF | 4.86 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000332_SV.000.0.0.2.0.pdf — PDF | 4.86 MB

SV

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000332_ES.000.0.0.1.0.pdf — PDF | 4.9 MB

ES

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000332_EN.000.0.0.1.0.pdf — PDF | 4.86 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000332_FR.000.0.0.3.0.pdf — PDF | 4.86 MB

FR

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 110.12 KB

IT, EN, DE, FR, ES

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.26 MB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Montaggio - Istruzioni di montaggio — PDF | 292.82 KB

IT

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 503.88 KB

FR

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 282.84 KB

EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 581.4 KB

IT

Documento disponibile in area riservata

Montaggio - Istruzioni di montaggio — PDF | 503.8 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 80 x 322 x 10 h | 78.5 kg | 0.25760

2. SCATOLA | cm 82 x 85 x 32 h | 11.5 kg | 0.22304

3. SCATOLA | cm 22 x 322 x 15 h | 21.700000762939 kg | 0.10626

Origine Merce: EU

Taric: 95069190

Repertorio: 0085086

Accessori



01330 OSTACOLO-DIVARICO

Moduli termoplastici utili per creare esercizi di deambulazione e perturbazioni durante il programma riabilitativo. Set di due pezzi.



01335 CARRELLO PORTA PERCORSI

Carrello porta percorsi per parallele, in acciaio verniciato e si può utilizzare per ogni tipo di moduli (non compresi).



01379 SET PERCORSI TERAPICI

Una serie di moduli in termoplastica e di sacchetti contenenti diversi materiali possono essere utilizzati come accessori per realizzare dei percorsi di deambulazione.




01380 CARRELLO PER PARALLELE

Carrello con appoggio antibracchiale applicabile a tutte le parallele. Offre un maggiore sostegno alla persona durante la deambulazione.



02400 SACCHETTO ANDATURA DA 1 KG

Sacchetto andatura da 1 kg. Contiene sabbia.

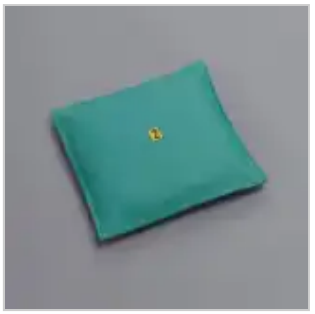

02410 SACCHETTO ANDATURA DA 2 KG

Sacchetto andatura da 2 kg. Contiene sabbia.



02420 SACCHETTO ANDATURA DA 3 KG

Sacchetto andatura da 3 kg. Contiene sabbia.



02430 SET 12 SACCHETTI ANDATURA

Set composto da 12 sacchetti di sabbia di diverso peso e dimensioni

PARALLELA PLUS 3M TILT



02500 SACCHETTO MOTORIO DA 0,3 KG

Sacchetto motorio da 300g. Contiene granuli in PVC.



02510 SET SACCHETTI MOTORI

Si compone di 16 sacchetti motori contenenti granuli.



08585 SET SACCHETTI SENSORIALI

Si compone di 12 sacchetti contenenti differenti materiali per offrire una diversa sensibilità di appoggio.



08586 RULLI-SACCHETTI

Moduli in termoplastica testurizzata con rotolo in legno e borsa sensoriale. Utile per creare esercizi di deambulazione e perturbazioni durante il programma riabilitativo. Set di due pezzi.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

PARALLELA PLUS 3M TILT



08587 SENSORIALI

Moduli sensoriali in termoplastica testurizzata. Utile per creare esercizi di deambulazione e perturbazioni durante il programma riabilitativo. Set di due pezzi.



08589 EMISFERE

Moduli in materiale termoplastico testurizzato con semisfere. Utile per creare esercizi di deambulazione e perturbazioni durante il programma riabilitativo. Set di due pezzi.



08591 CONCAVO-CONVESSO

Moduli termoplastici concavi-convessi. Utile per creare esercizi di deambulazione e perturbazioni durante il programma riabilitativo. Set di due pezzi.



AC0550 BARRA FINE CORSA

Accessorio di fine corsa e di supporto per agevolare l"utente nell"inversione del senso di deambulazione. Prolunga il percorso terapeutico - riabilitativo.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

PARALLELA PLUS 3M TILT



AC1257 KIT ANTISCIVOLO PARALLELE

Fasce adesive antiscivolo applicabili alla pedana base di qualunque sistema di parallele. Particolarmente utile nel caso d"utilizzo senza calzature. 16 pezzi.



AR12100 SET PADS PROPRIOCETTIVI

Set di tre cuscini propriocettivi con tre densità diversi: morbida, media e alta. La dimensione è quadrate per tutti e tre con spessore 5 cm. I cuscini sono rivestiti in similpelle blu con trattamento antibatterico.



AR12101 SOFT PAD

Cuscino propriocettivo con densità morbida di dimensioni quadrate con spessore 5 cm. Il cuscino è rivestito in similpelle blu con trattamento antibatterico.



AR12102 MEDIUM PAD

Cuscino propriocettivo con densità media di dimensioni quadrate con spessore 5 cm. Il cuscino è rivestito in similpelle blu con trattamento antibatterico.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO



AR12103 HARD PAD

Cuscino propriocettivo con densità alta di dimensioni quadrate con spessore 5 cm. Il cuscino è rivestito in similpelle blu con trattamento antibatterico.



AR12104 KIT STRAP

Set di tre velcro per i cuscini propriocettivi. I velcro sono rivestiti in similpelle blu con trattamento antibatterico. Possono essere applicati su tutti e tre i lati del cuscino.

Altre immagini dell’articolo



01327_1



_01327-parallela-plus-3m-tilt-parallele-scale-1



01327_5



01327-part-inclinazi_744002

PARALLELA PLUS 3M TILT



regolazione-larghezza-corrimano-parallele_-scale-3



01326_regolazione-1-parallele-scale-3

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

01327

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

PARALLELA PLUS 3M TILT



01326_3



parallele0006

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

01327

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

PARALLELA PLUS 3M TILT



parallele0003

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO