
chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620



**VAI ALLA SCHEDA ONLINE:** https://chinesport.wi-staging.it/go/03021/?_locale=it

# **03021** PODATA 3.0

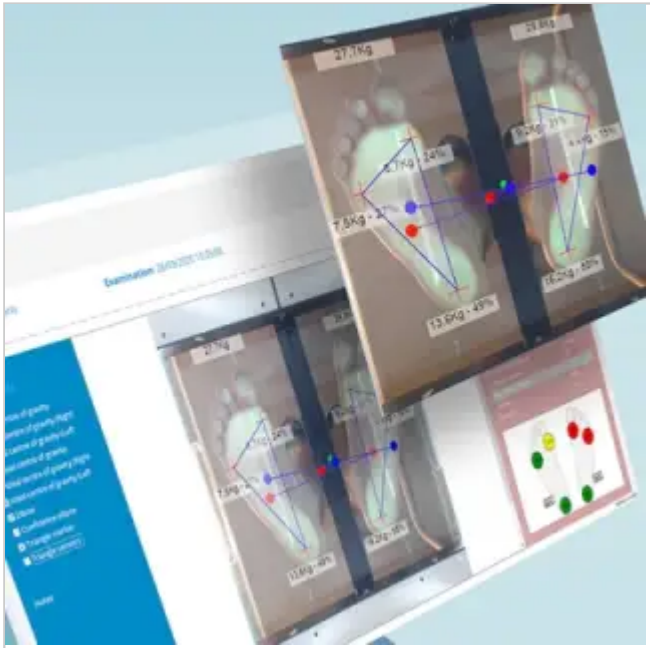

03021_preview

È un'originale pedana stabilometrica per l'equilibrio e l'analisi dinamica con un dispositivo di acquisizione delle immagini integrato anche per la funzione podoscopio. Le misurazioni possono essere effettuate su ogni foto.

È un'originale pedana stabilometrica per l'equilibrio e l'analisi dinamica con un dispositivo di acquisizione delle immagini integrato anche per la funzione podoscopio. È quindi possibile acquisire, salvare e confrontare immagini della persona in esame in momenti diversi. Le misurazioni possono essere effettuate su ogni foto.
Questa pedana stabilometrica è caratterizzata da sei celle di carico per consentire al paziente di stare in piedi in una posizione libera e naturale. In particolare il software GPS permette di posizionare virtualmente le sei celle di carico nei punti prestabiliti sotto ogni piede. Questa operazione non solo semplifica le fasi preliminari al test, ma elimina completamente qualsiasi posizionamento predefinito del paziente come necessario per apparecchiature simili. Questo

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620



movimento delle celle di carico garantisce la ripetibilità delle misurazioni, anche in una fase successiva.

Quindi viene rilevato il peso corporeo e la sua distribuzione tra il piede destro e sinistro, e quindi la distribuzione nei tre punti di riferimento come il primo metatarso, il quinto metatarso e il tallone di ciascun piede. Durante l'esame viene inoltre individuato il baricentro e la sua posizione rispetto a quella ideale nonché le oscillazioni sui diversi piani. Particolarità è la possibilità di impostare la durata anche per i test dinamici che coinvolgono il paziente in esercizi di biofeedback.

Il test stabilometrico può essere eseguito in varie “condizioni di esame”, alla ricerca di afferenze che influenzino il comportamento posturale della persona.

L'obiettivo è quello di dare evidenza del tipo di piede e di tenere monitorato se c'è un certo atteggiamento o rischio posturale scorretto. Tutte le informazioni raccolte dai due sistemi integrati di analisi statica, stabilometrica e dinamica possono essere utili per definire interventi terapeutici, programmi di esercizi mirati e altre azioni correttive, anche in una collaborazione interdisciplinare tra specialisti.

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620



Al termine dell'esame posturale è sempre possibile fornire al paziente un referto con i risultati, con confronto dati, grafici e immagini acquisite in momenti diversi.
In particolare per tutti i tipi di misure può essere riportata la relativa tolleranza, con evidenza se uno o più dati raccolti sono fuori spettro. Questo tipo di esame non è invasivo e può quindi essere ripetuto ogni volta che lo si ritiene opportuno.
Il computer non è compreso, ma può essere ordinato come accessorio codice 01799 con software GPS preinstallato.
Questa pedana stabilometrica per l'analisi statica e dinamica può essere successivamente integrata per consentire l'analisi statica della postura di tutta la persona.

---

**MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS**

The Podata device requires a computer having the following minimum requirements:

- Intel i5 CPU or higher
- 8 GB RAM

- 20 GB of free space, SSD or NVMe disk
- Display with resolution of 1280 x 1024
- 3 free USB ports
- Windows 10 OS

—

Notice: We recommend that you do not install other software on your computer to avoid possible conflicts.

Garanzia: 24 mesi

# Specifiche tecniche e dimensioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Peso** | 31 kg | **Piedini** | regolabili per messa a livello (livella bulleye integrata) |
| **GMDN-CND** | N.D. / V9099 | **Dimensioni** | 68 x 43.5 x 33,5 cm |
| **Alimentatore** | non rimovibile (incluso) | **Collegamento** | USB 2.0 |
| **Illuminazione** | LED Bianchi | **Presa elettrica** | ITA / UK |
| **Risoluzione immagine** | FHD | **Alimentazione primaria** | 100÷240 V~ - 50-60 Hz 400-200 mA |
| **Dimensioni piattaforma** | 40 x 40 cm, divisa in due | **Maniglie per il trasporto** | integrate nel telaio |
| **Frequenza di campionamento** | Impostabile 1÷100 campioni/s | **Carico di lavoro in sicurezza** | 180 kg |

# Documentazione disponibile online

**DICO - Dichiarazioni di conformità EU** - PODATA 3.0 PDF | 2.03 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

**DICO - Dichiarazioni di conformità EU** - DTOC000094_EN.003.3.0.4.3.pdf — PDF | 2.03 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

**DICO - Dichiarazioni di conformità EU** - PODATA 3.0 — PDF | 1.5 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

**DICO - Dichiarazioni di conformità EU** - DTOC000094_EN.002.1.0.1.pdf — PDF | 1.5 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

**IFU - Istruzioni per l'uso** - DISPOSITIVO PER ANALISI STABILOMETRICA E PLANTARE — PDF | 4.25 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

**IFU - Istruzioni per l'uso** - DTIU000278_EN.002.1.2.1.pdf — PDF | 4.24 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

**Manuale istruzioni - edizione passata** - Manuale Istruzioni — PDF | 1.97 MB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

**Dichiarazione di conformità - edizione passata** - Dichiarazione di conformità — PDF | 100.27 KB

IT, EN, DE, FR, ES

Documento disponibile in area riservata

**Manuale istruzioni - edizione passata** - Manuale Istruzioni

PDF | 1.81 MB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

# Logistica

1. SCATOLA SU BANCALE | cm 60 x 80 x 52 h | 40.5 kg | 0.24960

# Accessori



**01799** COMPUTER

Computer con software per GPS pre-installato in fabbrica con tutti i settaggi e configurazione dei dispositivi d"acquisizione delle immagini per il laboratorio posturale GPS in acquisto.



**02104** STAMPANTE A COLORI

Stampante a colori acquistabile dal cliente. Per stampare il referto del paziente.



**02998** BODY SAFE

Fornisce una maggiore sicurezza e stabilità alla persona quando si trova sul PODATA.



**AC0868** STEP

Rende più agevole l'accesso alla pedana del dispositivo PODATA.




**AC1249** CONNESSIONE TV MIRACAST

Questo dispositivo di connessione consente alla persona in esame di vedere su un grande schermo il software in esecuzione per un maggiore coinvolgimento e consapevolezza della propria postura, ed anche per esercizi di biofeedback se il laboratorio è conf


chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620



# Altre immagini dell’articolo



03021

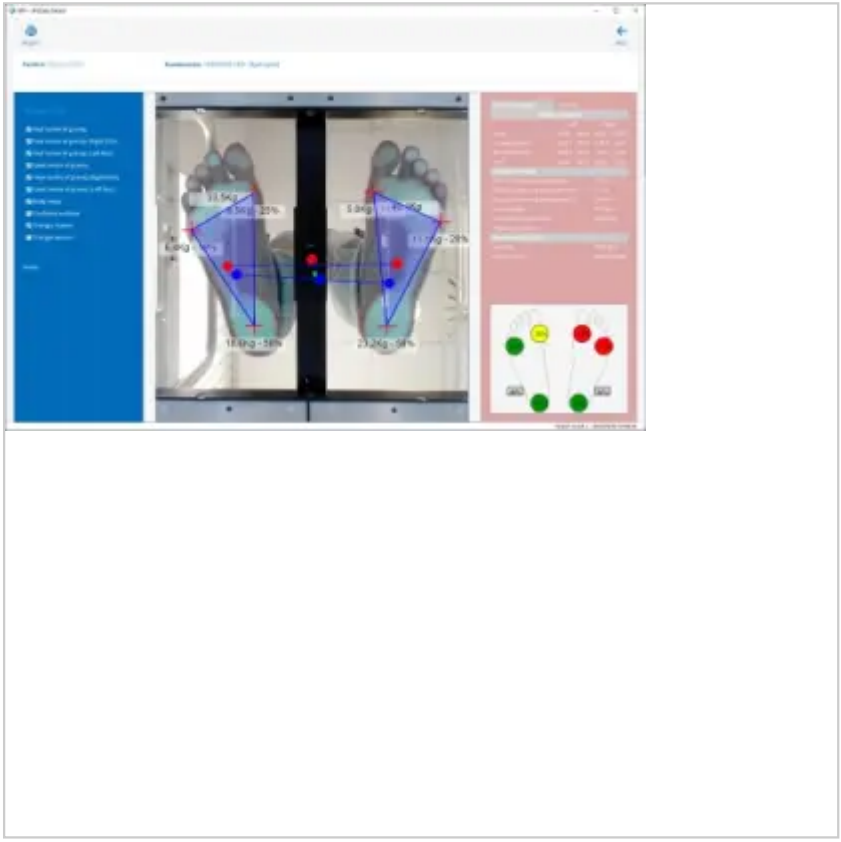

03021_03