VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/06830/?_locale=it

06830 ANALIZZATORE

Questo pezzo di equipaggiamento permette di analizzare il dislivello delle creste iliache. Utilizzato per la valutazione della dismetria degli arti inferiori.

Lo strumento è costituito sostanzialmente da una livella alla cui barra principale, ricurva, sono applicate due ulteriori barre articolate all'estremità. La curvatura della prima barra ha lo scopo di adattarsi alla anatomia del passaggio dorso lombare, le barre laterali sono disegnate per appoggiarsi sulle creste iliache e saranno più o meno aperte a seconda delle dimensioni del bacino.



06830_preview

Una livella adattata, utile ancora oggi

La bolla posta al centro della barra principale ci dice in sostanza se il bacino è a livello, a soggetto valutato in ortostatismo con carico ben distribuito sui due arti inferiori. In caso contrario l'operatore posizionerà uno o più rialzi dal lato in caduta, fino a mettere in bolla lo

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

strumento. Sarà a questo punto possibile verificare l'allineamento del bacino e quantificare la differenza di lunghezza degli arti inferiori. A questo scopo l'accessorio, Set Spessori G (cod. 06730), può verificare questo allinemaneto con una serie di rialzi di ½ e di 1 cm.

Ricordiamo che la valutazione di una differenza di lunghezza degli arti inferiori richiede molta attenzione. Infatti sono possibili errori sia per un non corretto posizionamento del soggetto sia per presenza di variabili anatomiche, come asimmetriche scheletriche del bacino, vizi di torsione degli arti inferiori, lassità di una o più articolazioni, retrazioni muscolotendinee. Per migliorare la accuratezza della valutazione pertanto è consigliabile ricorrere a più misurazioni e in posture diverse, modalità ora rese possibili dai diversi strumenti presenti in questo kit.

Garanzia: 24 mesi

CE CE

MADE IN ITALY

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	1,8 kg	**Dimensioni**	34 x 8 x 2 h cm

Documentazione disponibile online

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 98.86 KB

IT, EN, DE, FR, ES

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.7 MB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 23 x 31 x 6 h | 0.5 kg | 0.00428

Repertorio: 0198038

Accessori



06730 SET SPESSORI G

Set spessori G; misura 44: n. 6 spessori 1 cm, n. 1 spessore 0,5 cm.

Altre immagini dell’articolo



06830



06830_arrows



06830_2




06830_3

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

ANALIZZATORE

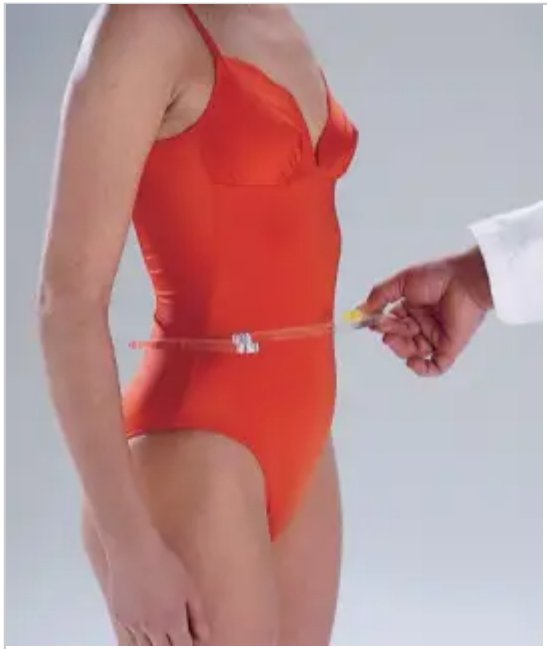

06830_diagnostica_analizzatore