VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/06855/?_locale=it

06855 INCLINOMETRO D'OSUALDO

L'Inclinometro D'Osualdo è uno strumento per la misurazione dell'angolo di Cobb e del gibbo.

L'Inclinometro D'Osualdo è uno strumento per la misurazione dell'angolo di Cobb e del gibbo. L’inclinometro è costituito da un elemento quasi-rettangolare di plexiglas recante una scala goniometrica, al cui centro è posizionata una piccola asta libera di ruotare e recante una bolla; l’estremità libera dell’asta reca l’indice di lettura per la scala goniometrica. Il lato più lungo del rettangolo presenta una rientranza per renderne più agevole l’applicazione sul paziente (nel caso in cui le spinose siano sporgenti).

L’inclinometro è uno strumento manuale, normalmente utilizzato in due situazioni cliniche:

1. nella misurazione dell’angolo di rotazione del tronco durante il test di anteroflessione;
2. nella misurazione dell’angolo di Cobb sulle radiografie (sia in proiezione AP che LL), quindi sia nella scoliosi che nella cifosi/lordosi.



06855_preview

Il manuale (cod. 01304) viene fornito con il dispositivo.

TECNICA DI MISURAZIONE DELL'ANGOLO DI COBB CON L'INCLINOMETRO SULLE RADIOGRAFIE

L'angolo di Cobb è dato dalla somma dei due angoli di inclinazione delle vertebre limite. La misurazione dell'angolo è più veloce del metodo tradizionale (è sufficiente accostare lo strumento alle vertebre limite e leggere il valore sulla scale graduata), non richiede strumenti aggiuntivi, non deteriora le radiografie, semplifica la misurazione eliminando quindi alcune possibili cause di errore.

Un vantaggio dell'inclinometro sugli altri strumenti è dato infine dalla possibilità di misurare sia l'angolo di rotazione del tronco (gibbo) sul paziente, sia l'angolo di Cobb sulle radiografie con un solo semplice strumento.

Garanzia: 24 mesi

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	0,6 kg	**Dimensioni**	19 x 8,5 x 1 h cm

Documentazione disponibile online

Approfondimenti - Tabella per calcolo della velocità di crescita — PDF | 29.97 KB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 98.86 KB
IT, EN, DE, FR, ES
Documento disponibile in area riservata


Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.7 MB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Logistica


1. SCATOLA | cm 11.5 x 29 x 4 h | 0.20000000298023 kg | 0.00133

Repertorio: 0198038

Altre immagini dell’articolo

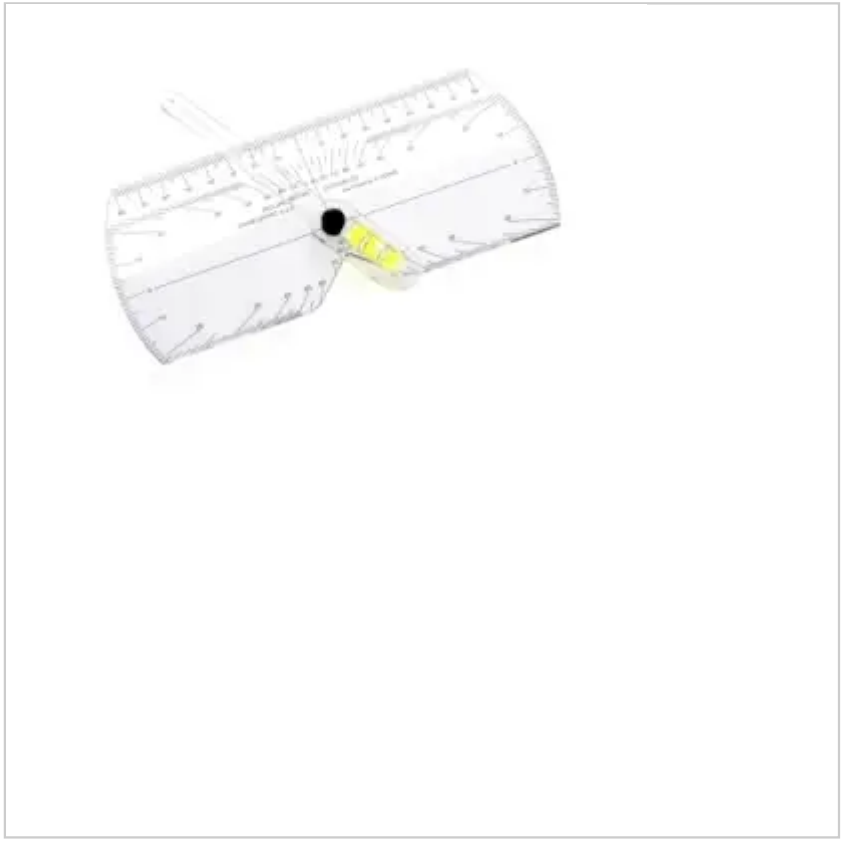

06855

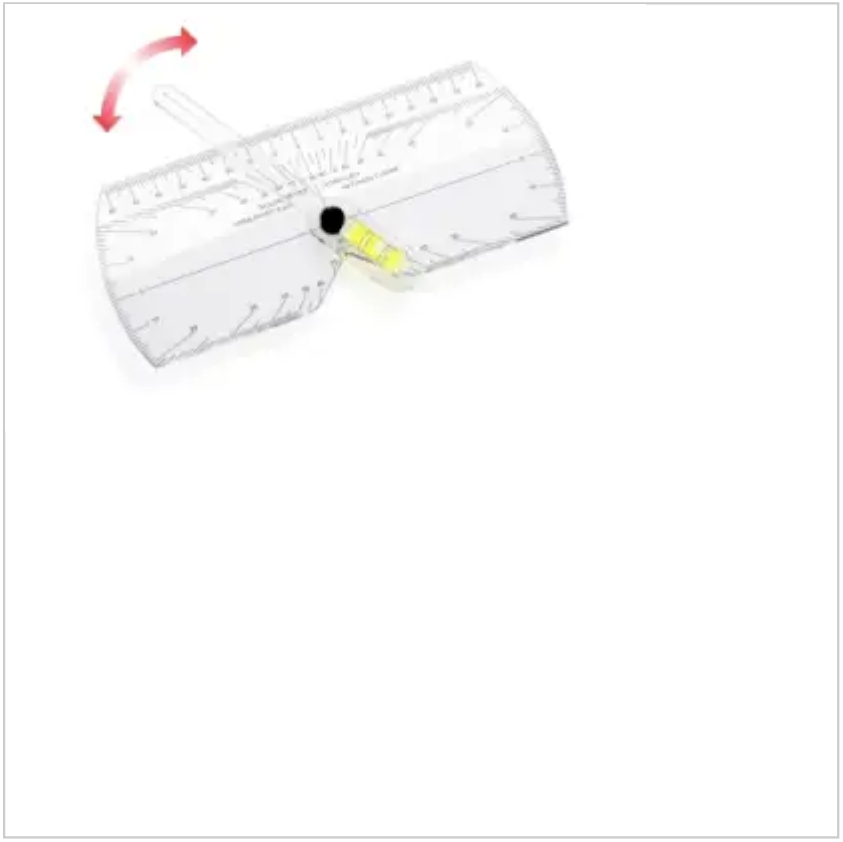

06855_arrows

INCLINOMETRO D'OSUALDO



06855_diagnostica_inclinometro-osualdo-4




06855_diagnostica_inclinometro-osualdo-1


chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

INCLINOMETRO D'OSUALDO

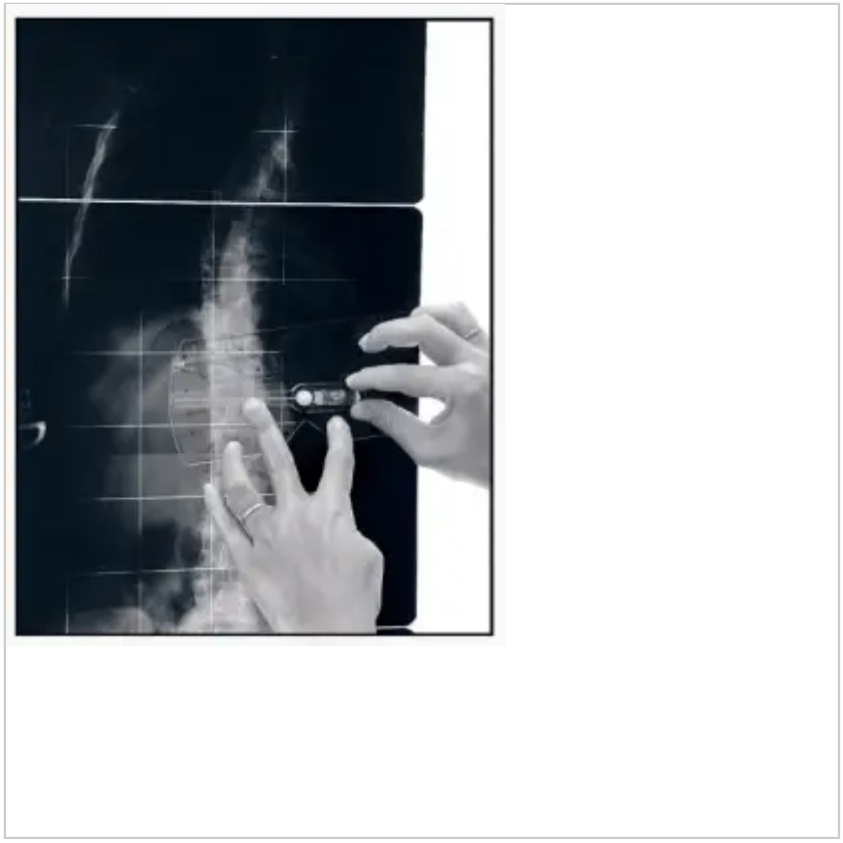

06855_diagnostica_inclinometro-osualdo-2

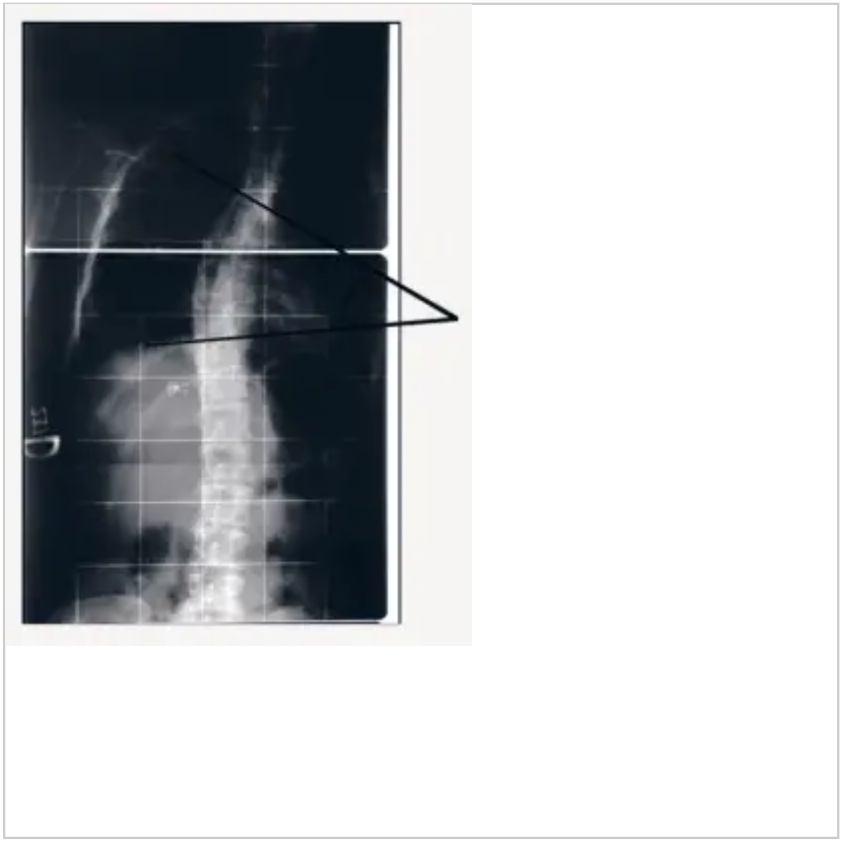

06855_diagnostica_inclinometro-osualdo-3