chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620



**VAI ALLA SCHEDA ONLINE:** https://chinesport.wi-staging.it/go/07526/?_locale=it

# **07526** MOTOMED LAYSON LA PROF

Cicloergometro adatto al training degli arti superiori ed inferiori dotato di una struttura facilmente trasferibile, concepito per la mobilitazione di pazienti costretti a letto per lunghi periodi.

Cicloergometro adatto al training degli arti superiori ed inferiori dotato di una struttura facilmente trasferibile, concepito per la mobilitazione di pazienti costretti a letto per lunghi periodi.

MOTOmed layson offre le stesse modalità di **funzionamento** (attivo, passivo, assistito), **standard di sicurezza** (antispasmo, protezione del movimento e avviamento dolce) e **software** del *MOTOmed loop*.

Il dispositivo è inoltre dotato di un ***sistema di scarico regolabile per le ginocchia*** che evita l'insorgere di blocchi o iperestensione delle stesse. Questo sistema è indispensabile per pazienti paralizzati e comatosi. Le coppe per i piedi sono disinfettabili, antiscivolo e con un bordo di protezione supplementare che elimina il rischio di contatto della caviglia del paziente con l'asse



07526_preview

dei pedali.

Viene fornito anche con:

- Fermapiedi rapido
- Monitor removibile
- Telecomando per paziente

**DIALISI**

La chinesiterapia con MOTOmed durante la dialisi può contribuire a un migliore filtraggio delle sostanze che vengono espulse dal sangue attraverso l'urina aumentando così l'efficacia della dialisi.

Grazie alle tre modalità terapeutiche anche pazienti deboli e affetti da più patologie possono trarre vantaggio dalla terapia del movimento con MOTOmed in fase di dialisi.

La terapia è inoltre in grado di rafforzare il sistema cardiovascolare nonché la condizione generale e le capacità personali.

**TERAPIA INTENSIVA E MOBILIZZAZIONE PRECOCE**

La Chinesiterapia con MOTOmed nella terapia intensiva e per la mobilizzazione precoce può contribuire a un importante miglioramento delle condizioni generali del paziente.
I pazienti allettati possono effettuare una riabilitazione passiva, assistita o attiva nel letto di cura o nel lettino per terapia. Oltre ai vantaggi generali della terapia, come la rieducazione, la regolazione del tono muscolare o la stabilizzazione della circolazione, MOTOmed layson supporta anche l'abbandono della ventilazione e l'emodialisi.
La Chinesiterapia con MOTOmed può contribuire ad accorciare i tempi di permanenza in terapia intensiva.

# Specifiche tecniche e dimensioni

| | |
|---|---|
| **Tipo di movimento** | Assistito |
| **Allenamento assistito** | Per arti inferiori |
| **Alimentazione** | 100-240V / max. 120 VA, 47-63 Hz |
| **Dim. Lunghezza** | 151 ÷ 178 cm |
| **Peso massimo utente** | 135 kg |
| **Regolazione altezza (max. altazza letto)** | 108 cm |
| **Classe del dispositivo (direttiva 93/42/CEE)** | Classe IIa |
| **Classe di isolamento elettrico / Parti applicate (norma UNI EN 60601-1)** | II / BF |

| | |
|---|---|
| **Allenamento assistito** | Per arti superiori |
| **Dim. Altezza** | 118 ÷ 166 cm |
| **Dim. Larghezza** | 62 ÷ 92 cm |
| **Peso dispositivo** | 92 kg |
| **Base parallela (distanza tra le guide)** | min 50 / max 80 cm |
| **Altezza base (altezza libera da terra letto)** | 10 cm |
| **Base divaricabile (larghezza divaricazione guide)** | min 45 / max 88 cm |

# Documentazione disponibile online

**Dichiarazione di conformità - edizione passata** - Dichiarazione CE — PDF | 4.61 MB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

**Manuale istruzioni - edizione passata** - Manuale utente — PDF | 1.3 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

**Brochure** - Brochure MOTOmed layson — PDF | 546.08 KB

IT

# Logistica

1. SCATOLA SU BANCALE | cm 80 x 120 x 140 h | 140 kg | 1.34400

# Accessori



**02081** MANICOTTO

Manicotto consigliato per pazienti con limitate capacità di presa e stretta, consente di fissare rapidamente la mano alle maniglie e impugnature. Fornita al pezzo.



**07519** IMPUGNATURA VERTICALE SGANCIO RAPIDO

Per utenti che dispongono ancora di una certa funzionalità di presa. Indicata per pazienti affetti da sclerosi multipla. Fornita in coppia dotata però di un meccanismo per l"aggancio/sgancio rapido al dispositivo.

# Altre immagini dell’articolo



07526




07526_1

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

07526

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

# MOTOMED LAYSON LA PROF

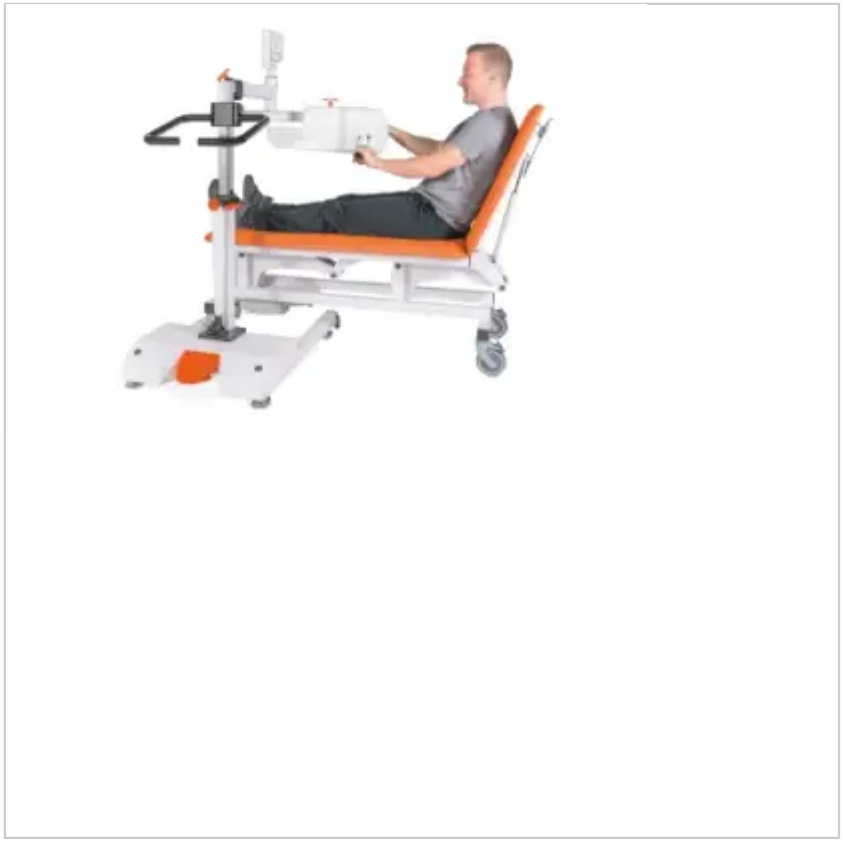

07526_2

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO