chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/LT2B19/?_locale=it

LT2B19 TILT TABLE 2B T

Lettino a quatto sezioni per statica in posizione supina, visita e trattamenti di terapia fisica fino a 180 kg. Regolabile in altezza oppure in inclinazione fino a 90° con alimentazione a batteria.

Lettino di statica a quattro sezioni con sistema di inclinazione elettrico alimentato a batteria ricaricabile 24V. Caricabatteria in dotazione.
Carico massimo in sicurezza kg 180. Inclinazione del pianale fino a 90° ed altezza del pianale regolabile cm 56-106 attraverso comando dedicato. Il grado di inclinazione del letto è misurabile con l'indicatore integrato. Sezione di testata regolabile in positivo (+80°) / negativo (-20°) tramite sistema a molla a gas con leva ergonomica e fornita di serie con tappo imbottito per il foro di respirazione naso bocca.
È prevista uno specifico *dispositivo meccanico di sicurezza* per consentire l'abbassamento manuale del tavolo in posizione orizzontale in caso di interruzione di corrente.



LT2B19_LT2E19_preview

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Le ruote di ampio diametro agevolano i trasferimenti e sono dotate di freno dedicato. Una ruota è direzionale.

Una guida centrale tra le due sezioni di appoggio per gli arti inferiori consente una migliore applicazione e fissaggio della fascia di sicurezza. Fasce di contenimento non incluse e acquistabili separatamente (si rimanda alla sezione “Accessori”).

Le pedane sono regolabili in modo indipendente +/- 20°.

Il **tappo** per il foro *naso/bocca* viene fornito di serie.

CODICI LEA (suggeriti)
GU n.65 del 18/03/2017 Suppl. Ordinario n. 15

- Stabilizzatore mobile per statica supina, con inclinazione regolabile dalla posizione orizzontale a quella verticale: **04.48.21.018**
- Regolazione della prono-supinazione dei piedi (coppia): **04.48.91.009x2**
- Regolazione intra ed extra rotazione del piede: **04.48.91.012x2**
- Regolazione della flesso-estensione del piede: **04.48.91.015x2**

- Regolazione indipendente della divaricazione di ciascun supporto per l'arto inferiore: **04.48.91.018**
- Quattro ruote piroettanti ø cm 8 min. di cui almeno due con freno: **04.48.91.030**
- Regolazione motorizzata della verticalizzazione mediante motore elettrico a bassa tensione: **04.48.91.039**
- Sostegni per arto superiore (coppia): **04.48.91.045x2**
- Divaricatore di tipo stretto o largo (in relazione alle esigenze dell'assistito): **04.48.91.048**

Garanzia: 24 mesi

CE CE RICICLO CE MADE IN ITALY CE CERTIFICAZIONE 4 CE CERTIFICAZIONE 6

Specifiche tecniche e dimensioni

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620


LT2B19

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

TILT TABLE 2B T

Regolazione inclinazione	Alimentazione a batteria
Tipo di pedane, regolazione altezza	Due pedane, regolazione indipendente
Tipologia di statica	Statica e terapia fisica
Densità	30 kg/m³
Numero di sezioni	4
Imbottitura spessore	4 cm
Alimentazione elettrica	a batteria
Altezza massima utilizzatore	200 cm
Indicatore di inclinazione in gradi	di serie
Rivestimento imbottitura classe di sicurezza	1 IM

Carico di lavoro	Fino a 180 kg
Tipologia di statica	Supina o prona
Peso	100 kg
Diametro ruote	12,5 cm
Ruota direzionale	di serie
Regolazione in altezza	56 ÷ 106 cm
Regolazione in inclinazione	elettrica
Sistema di freno individuale	su singola ruota
Carico massimo di lavoro in sicurezza	180 kg

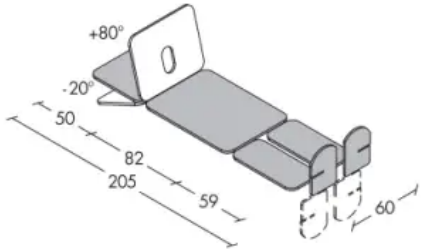

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000077_EN.002.1.0.1.pdf — PDF | 1.51 MB
EN

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - TILT TABLE 2BT - TILT TABLE 2ET — PDF | 1.51 MB
IT

IFU - Istruzioni per l'uso - TILT TABLE 2ET - TILT TABLE 2BT — PDF | 4.28 MB
IT
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000269_EN.003.3.0.0.0.pdf — PDF | 4.27 MB
EN
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000269_ES.003.3.0.0.0.pdf — PDF | 4.32 MB
ES
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000269_SV.003.3.0.0.0.pdf — PDF | 4.27 MB
SV
Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 192.07 KB
IT, EN, DE, FR, ES
Documento disponibile in area riservata

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale d'istruzioni

PDF | 1.12 MB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Questo prodotto è configurato. Scegli le opzioni desiderate.

TIPOLOGIA DI RIVESTIMENTO



W

SIMILPELLE

COLORE RIVESTIMENTO

COLORE

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LT2B19

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

TILT TABLE 2B T



1
VERDE SCURO



2
BLU CHIARO



3
BLU MARINO



4
GIALLO



6
VERDE CHIARO



7
GRIGIO CENERE

8
BEIGE



9
FUCSIA

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LT2B19

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

TILT TABLE 2B T

A
BIANCO

B
CREMA



E
ACQUAMARINA




F
ROSSO



G
CORALLO



H
BORDEAUX

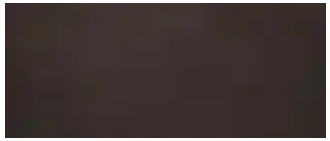

K
GRIGIO



L
BLU SCURO

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LT2B19

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

TILT TABLE 2B T



M
ANTRACITE

N
AVORIO



P
NERO



Q
LILLÀ



R
AZZURRO FIORDALISO



S
MARRONE SCURO



T
VERDE LIMONE



Z
ARANCIONE

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO


chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Accessori



01132 BATTERIA DI RISERVA IPX4

Batteria supplementare per garantire un utilizzo in continuo, mentre è in ricarica la batteria di serie.

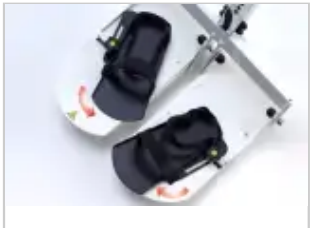

AC0002 SANDALI INTRA-EXTRA

Sandali che consentono la regolazione dei piedi in intra-extra rotazione, antro-posteriore, adduzione e abduzione



AC0003 SUPPORTI LATERALI

Supporti laterali in materiale morbido, regolabili in altezza, larghezza e profondità. (2 pezzi)



AC0004 IMPUGNATURE

Impugnature laterali per una presa ed autosostegno attivo da parte del paziente durante l"esercizio in statica supina.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO



AC0005 FASCIA DI BASE

Cinghia di bloccaggio per un contenimento ed un blocco arti in sicurezza (pezzo singolo).



AC0006 IMBOTTITURA PER FASCIA

Cuscino imbottito per un maggiore e confortevole supporto alla persona. Da utilizzare insieme alla cinghia AC0005.



AC0081 TAVOLO DI SERVIZIO - STATICA SUPINO

Tavolo di servizio utilizzabile con i lettini ad una, tre o quattro sezioni con persona in posizione statica supina.



AC0088 FASCIA UNICA PER GAMBE LETTINI TILT

Fascia con supporto imbottito alto per contenimento di entrambi gli arti inferiori.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO



AC0090 COPPIA SUPPORTI ANTIBRACCHIALI

Sostegni per gli avambracci con impugnatura per una comoda presa.



AC0096 CUNEI PER PIEDE EQUINO

Adattamento delle pedane d"appoggio per una maggiore inclinazione in estensione fino a - 30° ed in flessione + 10° laddove necessario per paziente con piede equino.



AC0318 CARICABATTERIA A PARETE

Caricabatteria a parete. Consente di ricaricare la batteria in dotazione o di riserva mediante collegamento alla rete elettrica. Viene fornito con spina standard SHUKO.



AC0319 CARICABATTERIE PORTATILE

Caricabatteria portatile con spina standard italiana. A richiesta è disponibile con altra spina.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO



AC0517 COPPIA SPINTORI TRONCO

Supporti laterali sagomanti che offrono una maggiore superficie di contatto con il paziente. Regolabili in altezza, larghezza e profondità.



AC0560 FASCIA TRONCO-BACINO TILT

Fascia con supporto imbottito per un comodo contenimento della persona in sicurezza. È consigliata per applicazione a livello tronco o bacino.



AC0561 COPPIA FASCE GAMBE TILT

Fascia con supporto imbottito per un posizionamento e stabilizzazione del singolo arto inferiore.



AC0578 DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Pannello di comando che permette di inibire tutte le funzioni di regolazione della pulsantiera in maniera tale da inibire azionamenti involontari degli attuatori.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO




AC0744 PULSANTIERA AGGIUNTIVA 2

Per i modelli dotati di due motori, versione a batteria. portatile ergonomica con magneti, collegabile alle parti metalliche della struttura del lettino. Fornito con cavo di alimentazione.



AC0913 CINGHIA ERGONOMICA 60

Può essere utilizzata per il contenimento del tronco/bacino o per le gambe. È specifico solo per l''opzione 60 cm di larghezza del lettino di statica. (pezzo singolo)

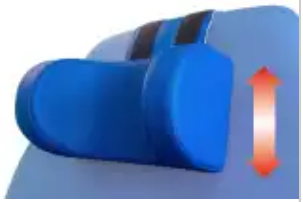

AC0949 CUSCINO POGGIATESTA

Cuscino imbottito e sagomato per un contenimento laterale e stabilizzazione a livello cervicale. Scegliere colore di tappezzeria. (pezzo singolo)



AC1134 INCLINOMETRO MAGNETICO PER LETTINI

Goniometro con scala graduata +/- 90° dotata di magneti per applicazione/rimozione rapida al lettino di statica.

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Altre immagini dell’articolo




LT2B19_5




LT2B19_1

TILT TABLE 2B T

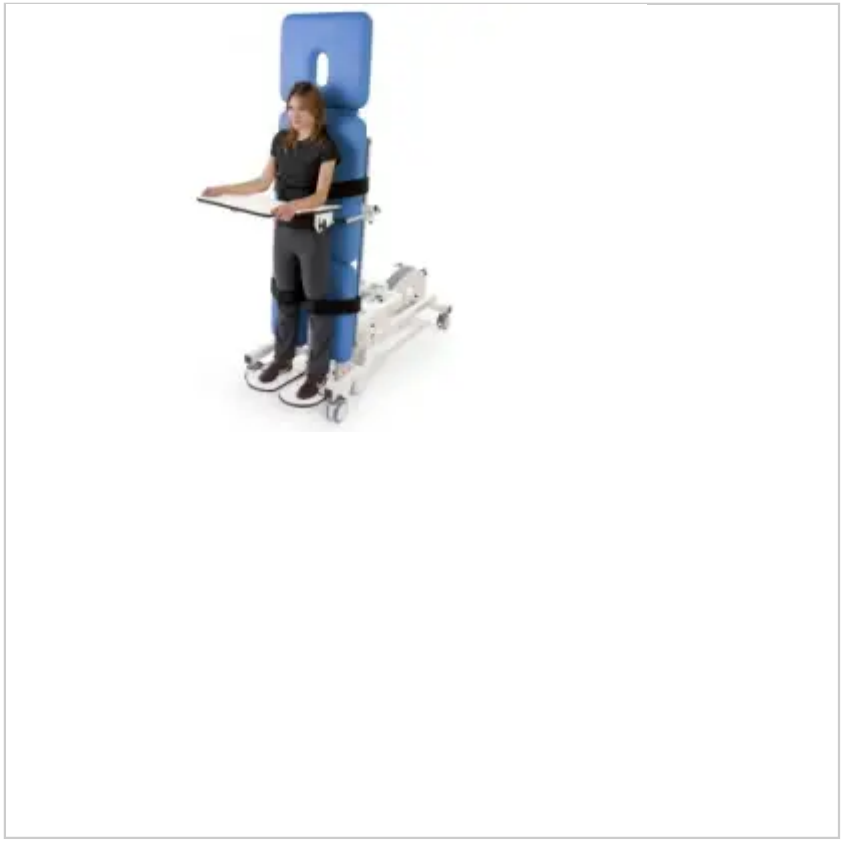

LT2B19_2

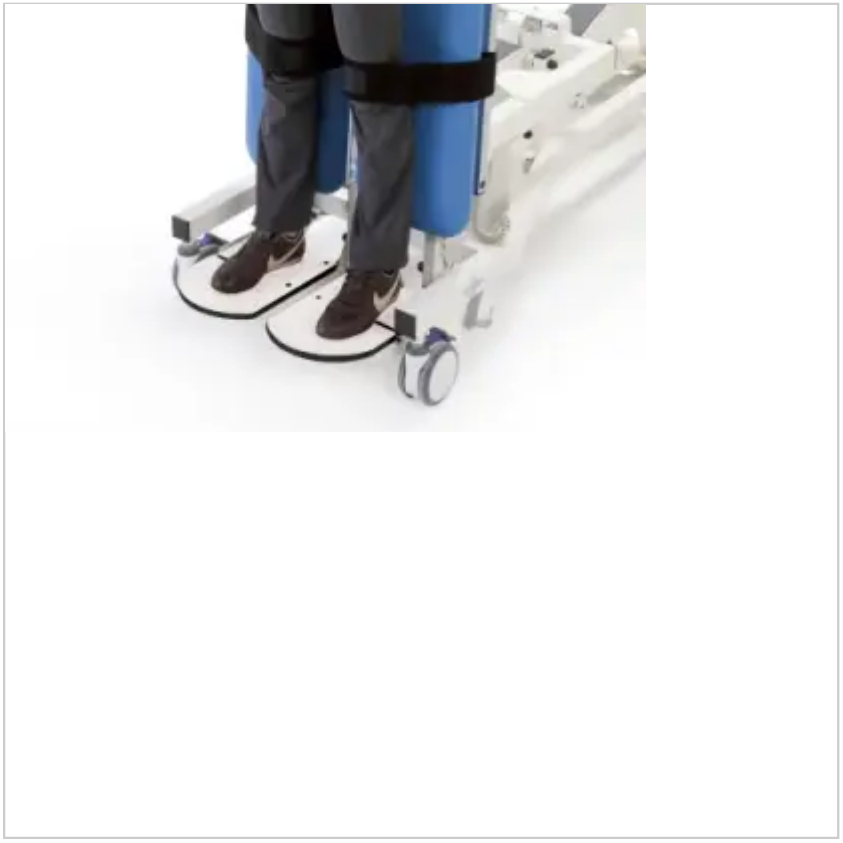

LT2B19_4

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

TILT TABLE 2B T



chinesport-3094_2



chinesport-TILT3067

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO


chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LT2B19

TILT TABLE 2B T



AC0744

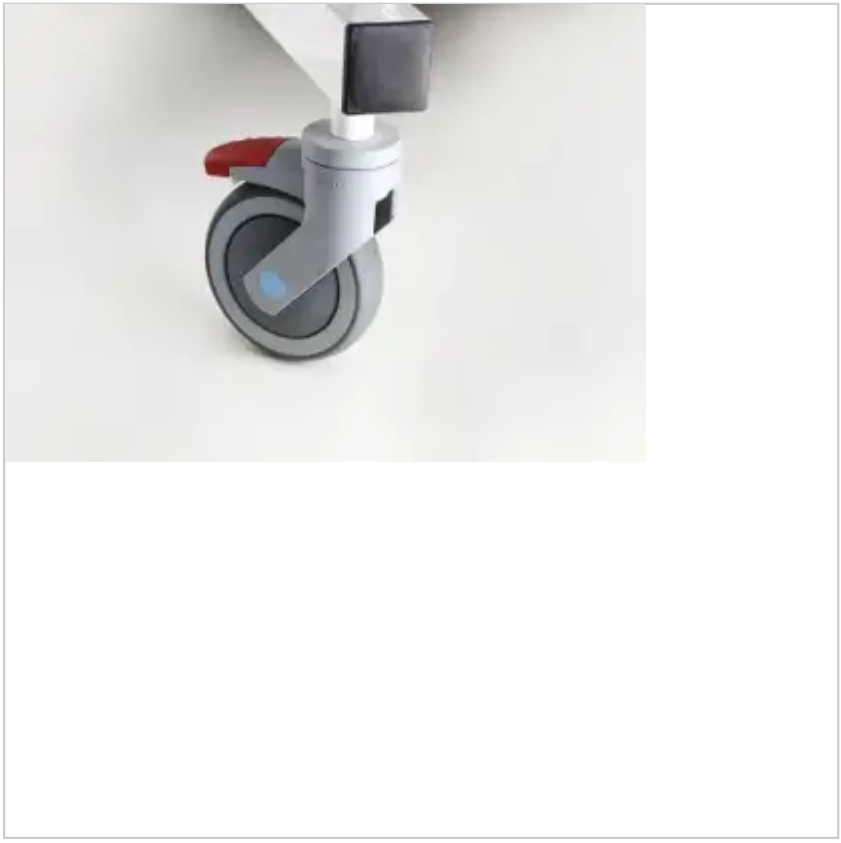

sinarimage_17220-9

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LT2B19

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

TILT TABLE 2B T



chinesport-TILT3320

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO